
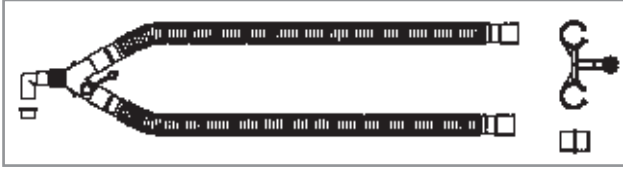


Erişkinler için ventilatör devreleri

Hudson RCI erişkin ventilatör devreleri çeşitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müşteri konvansiyonel veya 22 mm mavi polietilen tüplü ısıtıcı telli devreleri seçebilir. Portlu y parça basıncın algılanmasına ve sıcaklığın izlenmesine olanak tanır ve kullanımda olmadığı zaman portları tıkmak için plastik bir bağla tutturulmuş kapaklar içerir. Tüm Hudson RCI erişkin ventilatör devreleri, çeşitli ventilatörler ve aksesuarlarla birlikte kullanım için standart 22 mm ve 15 mm bağlantılar içerir.


Isıtıcı telli devreler spesifik olarak CONCHA-THERM IV ısıtıcı nemlendirme sistemleri ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır. Tüm devreler 180 cm uzunluğundadır ve başka türlü belirtilmediği takdirde kolide 10 tane olacak şekilde tek tek paketlenmiştir.

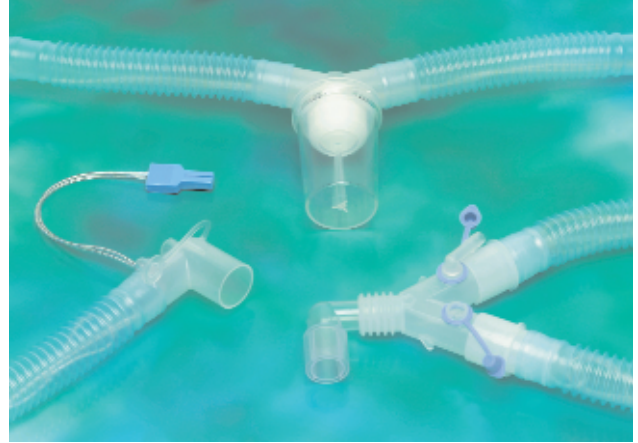

Ventilatör Devre Seti

REF 1607


- 180 cm Düz hortum konnektörü ile birlikte

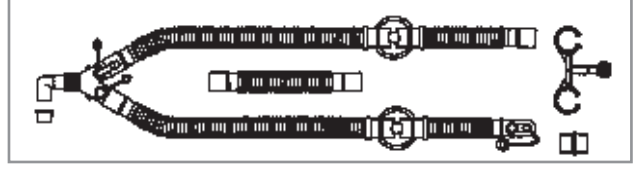

Ventilatör Devre Seti

REF 1609


- Ventilatör Devre Seti, 180 cm, Dirsek konnektör, İki Su Tuzağı ve Nemlendirme Hattı ile birlikte

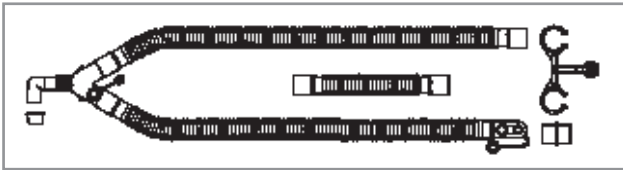

Ventilatör Devre Seti

REF 1608

- 180 cm Dirsek konnektör ve Nemlendirme Hattı ile birlikte

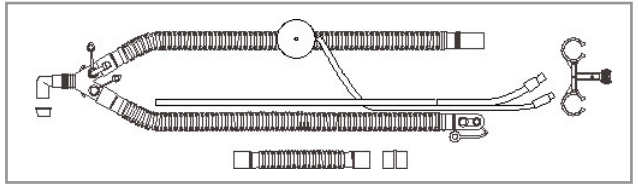

Üniversal Ventilatör Devresi

REF 1610

- Dışarı hava verme valfi, Basınç Algılama Hattı ve Nemlendirme Hattı ile birlikte 180 cm

Erişkinler için Isıtıcı Telli Ventilatör Devreleri

Ayrı sıcaklık probu adaptörü ile birlikte inspirasyon hattı ısıtıcı devre aksesuarı

REF 780-19


- Kolide 20 tane olacak şekilde paketlenmiştir
- Devre Aksesuarı, Tek İspirasyon hattı, ısıtıcı



Ventilatör Devre Seti

REF 780-33


- 180 cm, yalnızca inspirasyon hattı ısıtıcı, ekspirasyon hattında su tuzağı ve nemlendirme hattı

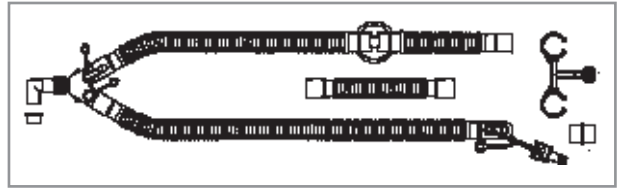

Ventilatör Devre Seti

REF 780-34


- 180 cm, Yalnızca inspirasyon hattı ısıtıcı, İspirasyon ve Ekspirasyon Hatlarında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı

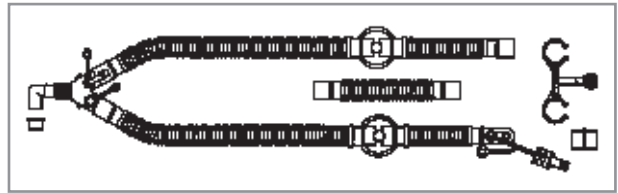

Ventilatör Devre Seti

REF 780-35


- 180 cm. Basınç izleme tüpleri ve ikili ısıtıcı hatlar

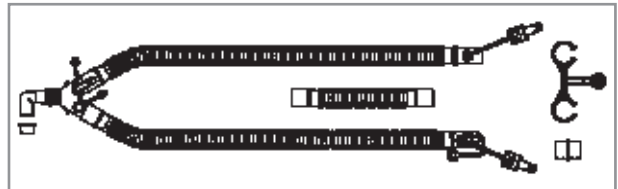

Ventilatör Devre Seti

REF 780-36

- 180 cm İkili Isıtıcı hatlar, İspirasyon ve Ekspirasyon Hatlarında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı

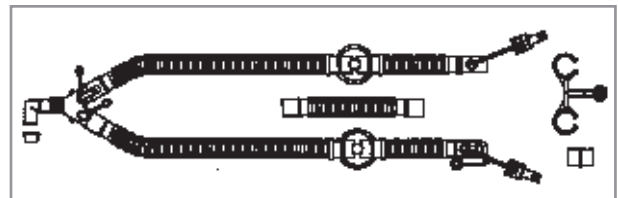

Neonatal Isıtıcı-Telli Ventilatör Devreleri


COCHA-THERM IV (21-volt) ısıtıcı nemlendirme sistemleri ile birlikte kullanım için özel olarak tasarlanmış olan Hudson RCI ısıtıcı telli neonatal devreleri maksimum uyum ve kullanım kolaylığı için gerekli olan adaptörleri içerir. Konvansiyonel neonatal devreler de mevcuttur. Hafif, gerilebilen, polietilen tüplerden yapılmış olan Hudson RCI neonatal devreleri 120 cm uzunluğundadır ve kolide 20 tane olacak şekilde tek tek paketlenmiştir.



Neonatal Standart Ventilatör Devresi

REF 780-12


Uzak Sıcaklık Portu, İki Su Tuzağı ve Nemlendirme Hattı olan Üiversal Neonatal

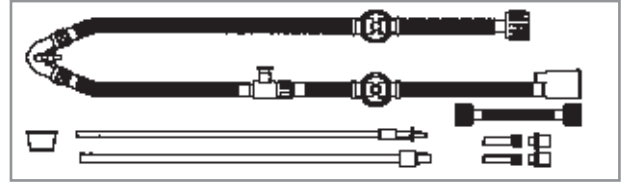

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-13


Uzak Sıcaklık Portu, Ekspirasyon Hattında Su Tuzağı ve Nemlendirme Hattı olan tekli 21 Volt Isıtıcı Devre

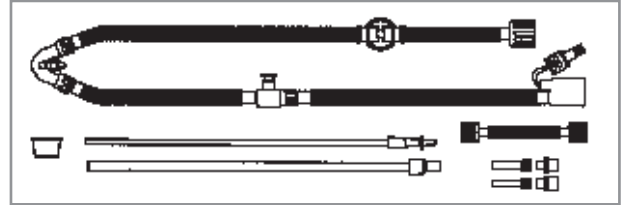

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-14


Uzak Sıcaklık Portu, İspirasyon ve Ekspirasyon Hattı Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı olan tekli 21 Volt Isıtıcı Devre

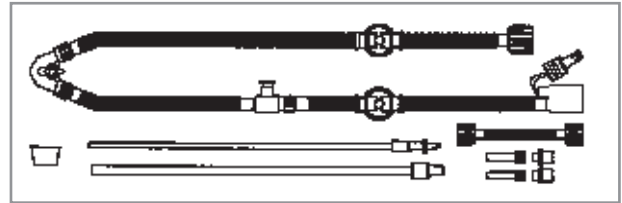

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-07


Uzak Sıcaklık Portu, ve Nemlendirme Hattı olan ikili Isıtıcı Devre

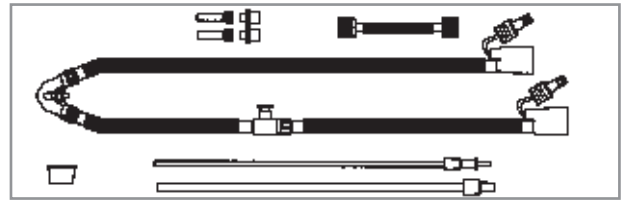

Poli Neonatal Ventilatör Devresi

REF 780-15

Uzak Sıcaklık Portu, İspirasyon ve Ekspirasyon Hattında Su Tuzakları ve Nemlendirme Hattı olan 21-Volt İkili Isıtıcı Devre

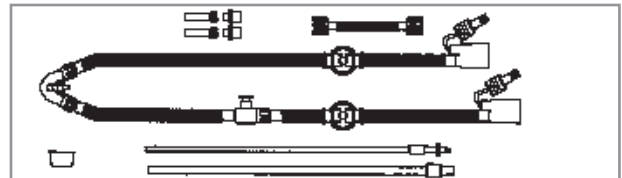

Üniversal I.P.P.B. Devresi**REF 41560**

- Tüm I.P.P.B makineleri ile birlikte kullanım için
- Şeffaf başlığı ve ekspirasyon akışını saptırıcısı olan dışarı nefes veren hassas valf
- Yüksek çıktılı nebulizör, ağızlık, CORR-A-FLEX tüpler, çoklu adaptör kiti ve expirasyon hattı valfı ile bütün halinde
- Kolide 50 tane olacak şekilde paketlenmiştir




Çocuk için Nazal CPAP Kanülleri

Hudson RCI çocuk nazal sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) kanül sistemi çocuğa nazal CPAP uygulama ile ilişkili travmayı azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Optimal rahatlık ve performansı garanti etmek için her bir kanül sıkı kalite kontrol standartlarına göre tek tek kontrol edilir.

Çocuk için Nazal CPAP Kanül

- Yumuşak, anatomik olarak eğik çatal oturmayı artırır ve nazal septal nekrozu en aza indirir
- İki uygun ürün konfigürasyonu
- Altı çatal boyutu yaklaşık boyut ayarlama için daha fazla seçenek sunar
- Basınç portu proksimal hava yolu basıncının izlenmesine olanak tanır
- Ayarlanabilir dik-açılı konektörler tüplere pozisyon verilmesini kolaylaştırır
- Mekanik ventilatörler, su sızdırmaz sistemler veya değişken ağızlı CPAP jeneratörler ile birlikte kullanılabilir
- Hepsi kolide 10 tane olacak şekilde paketlenmiştir

CPAP kanül boyutları	
Ağırlık Aralığı	Önerilen Boyut
700 gramdan az	0
700-1250 gram arası	1
1250-2000 gram arası	2
2000-3000 gram arası	3
3000 gram üzerinde	4
1 ila 2 yaşında	5

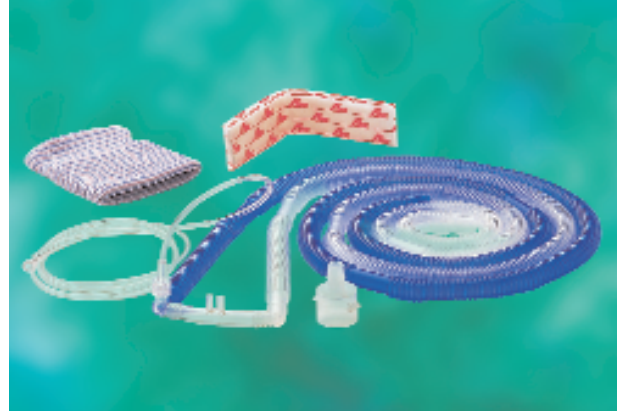

Çocuk için Nazal CPAP Kanül Sistemi


Her bir paket şunları içerir: bir kanül, bir inspirasyon ve bir de ekspirasyon dirseği, iki tane 120 cm uzunluğunda 10 mm I.D. oluklu tüp, bir tane 15 cm basınç izleme hattı, bir tane 22 mm'den 10 mm'ye nemlendirici adaptörü, bir tane örgü başlık ve iki tane 15 cm lik bölümler halinde Velcro sabitleme bantı.

REF	Tanım	Boyut
41683	Çocuk nazal CPAP sistemi	0
41685	Çocuk nazal CPAP sistemi	1
41686	Çocuk nazal CPAP sistemi	2
41687	Çocuk nazal CPAP sistemi	3
41688	Çocuk nazal CPAP sistemi	4
41689	Çocuk nazal CPAP sistemi	5

Çocuk için Nazal CPAP Kanülü

Her bir paket şunları içerir: bir kanül, bir tane inspirasyon için dirsek konektörü, bir tane ekspirasyon için dirsek konektörü, iki tane 10 mm'den 7.5 mm'ye adaptör, bir tane örme başlık ve iki tane 15 cm'lik bölümler halinde Velcro sabitleme bantı

REF	Tanım	Boyut
41690	Çocuk nazal CPAP kanülü	0
41691	Çocuk nazal CPAP kanülü	1
41692	Çocuk nazal CPAP kanülü	2
41693	Çocuk nazal CPAP kanülü	3
41694	Çocuk nazal CPAP kanülü	4
41695	Çocuk nazal CPAP kanülü	5

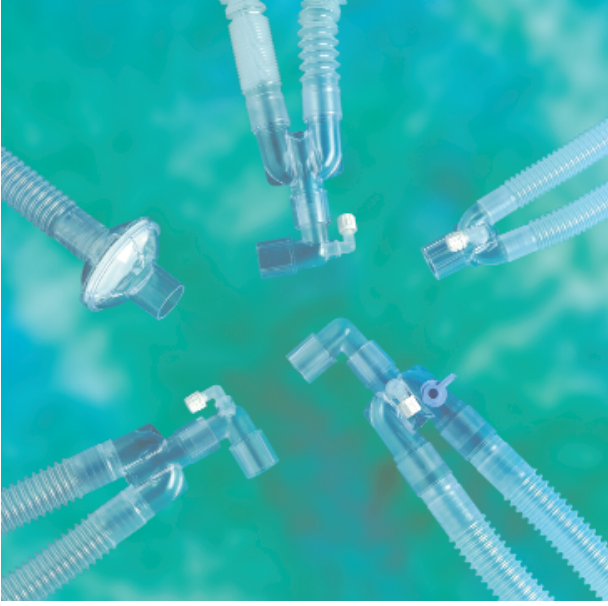

Hudson RCI disposable anesthesia breathing circuits and accessory components are cost-effective, easy to use, and flexible.

Our high-quality standard circuit configurations are universal as required components. Each procedure is fully configured as the "correct" circuit for easy and safe configuration. We also offer a full range of anesthesia accessories. All circuits and connectors are ISO and ASTM standard compliant. All circuits are packaged in 20 units per box.

Dispozıbl Ventilatör Hortumu


REF 360600

Uzatma Hortumu, 22mm konektörleri olan 1 m



Erişkin için Dispozıbl Anestezi Solunum Devreleri, 22mm

- Pozisyon verme kolaylığı açısından rahat şekillere bükülür.
- Benzer uzunluktaki oluklu devrelerden daha az depolama yeri

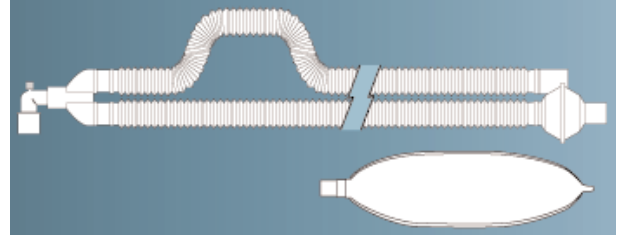

REF 311203

1.6m, 1m uzatma hortumu olan gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça, 3L soluma torbası ve 22M-22M adaptör

REF 311403

Uzatılabilir 0.5-1.8m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça, 1m uzatma hortumu ve 3L soluma torbası

REF 318200

1.6m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça, 1m uzatma hortumu ve 22M-22M adaptör

REF 318202

1.6m, 1m uzatma hortumlu gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça, 2L solunum torbası ve 22M-22M adaptör

REF 351100

1m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça

REF 351200

1.6m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça

REF 351400

Uzayabilir 0.5-1.8m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça

REF 351500

Uzayabilir 0.8-2.6m, gaz numunesi toplama portu olan Y parça

REF 351600

2.4m, gaz numunesi toplama portu olan Y parça

Pediyatrik Dispozıbl Anestezi Solunum Devreleri, 15mm

- 15mm sabit pediyatrik Y parça ve oluklu tüpler
- Tüm devreler 15mm x 22mm makine manşetleri içerir
- Tüm pediyatrik devreler kolide 20 tane olacak şekilde paketlenmiştir

REF 313901

15mm, 1.5m, 1m uzatma hortumlu gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça, 1L solunum torbası ve 22M-22M adaptör

REF 353900

15mm, 1.5m, gaz numunesi toplama portu olan sabit Y parça